



Veterina

**Katalog zdravotnické techniky, příslušenství a
služeb pro veterinární ordinace a kliniky**





Obsah:

Pulzní oxymetry.....	4-5
Monitory vitálních funkcí.....	6-7
Odsávačky.....	8-11
Injekční dávkovače.....	12-13
Infuzní pumpy.....	14-15
Průtokový ohřívač infuzních roztoků.....	16
Elektrochirurgické generátory.....	17-18
Sterilizátory.....	19-21
Nabídka servisních prací.....	22
Nabídka příslušenství.....	23-26

Utech UT100V

Přenosný pulzní oxymetr

Malý a lehký pulzní oxymetr s barevným LCD displejem, vybavený zvukovými a světelnými alarmy. Oxymetr je vhodný pro monitorování psů, koček a koní, stačí jen zvolit vhodný SpO2 senzor Nellcor.

- Monitorování parametrů SpO₂ a tepové frekvence
- Barevný LCD displej s rotací
- Menu v českém jazyce
- Zobrazení měřených hodnot, plethysmografické křivky a tabulkových trendů nebo grafu
- Výběr ze tří nastavitelných režimů
- Zvukový a světelný alarm
- Velká kapacita paměti pro naměřené hodnoty
- Přenos dat do počítače pomocí softwaru
- Kompatibilní se senzory Nellcor (nejrozšířenější a nejlevnější senzory na trhu)
- Provoz 4x AA baterie (20h nepřetržitého provozu)
- Automatické vypnutí přístroje
- Hmotnost: 258g
- Rozměry: 135x75x28mm
- Dodáváno v sestavě: přístroj, sonda, uživatelský manuál
- Volitelné příslušenství: ochranné silikonové pouzdro/stojánek brašna pro uskladnění či přenášení, AC adapter, software pro přenos a analýzu dat



silikonové ochranné pouzdro / stojánek



software pro přenos a analýzu dat



AC adaptér



brašna pro přenášení nebo uskladnění



SurgiVet V1030



Přenosný digitální pulzní oxymetr

Nejnovější model pulzního oxymetru BCI/SurgiVet, který Vám vždy zaručí spolehlivé výsledky v náročných podmínkách. Díky své flexibilitě a možnostem nastavení je prakticky využitelný v jakémkoliv prostředí. Digitální pulzní oxymetr Spectro 1030 umožňuje měřit SpO_2 a pulz při nízké krevní perfuzi a eliminuje pohybové artefakty.

- Monitorování parametrů SpO_2 a tepové frekvence
- **Digitální autokorelace pro potlačení pohybových artefaktů a monitorování při nízké perfuzi**
- Velký LED displej, který je snadno čitelný i z velkého úhlu
- Bagraf pulzace
- Lehce ovladatelný
- **světelný a zvukový alarm**
- 3 operační režimy – klinický, spánkový a domácí užití
- Velice odolný kryt
- Kompatibilní se všemi senzory BCI™ a Nellcor
- Bateriové napájení
- Hmotnost: 340 gramů
- Dodáváno v sestavě: přístroj, 4x AA baterie, sonda, uživatelský manuál
- Volitelné příslušenství: dokovací stanice, ochranné pouzdro, dobíjecí lithiový akumulátor, síťový zdroj, USB kabel tiskárna, kompletní řada sond SpO_2



SurgiVet™

Utech VS2000V

Lůžkový pulzní oxymetr / Monitor neinvazivních tlaků / Monitor vitálních funkcí

Kompaktní, snadno přenosný a cenově dostupný monitor vitálních funkcí VS2000. Monitor vyniká svou nízkou hmotností(2kg) a možností provozu na baterii až 5 hodin. Nízké provozní náklady díky použití senzorů Nellcor

- přehledný 7" barevný TFT displej s nastavitelnou svítivostí
- menu v českém jazyce
- kompaktní a jednoduše přenosný
- zobrazení až 3 křivek
- detekce S-T segmentu
- zobrazení velkých čísel na displeji
- světelné a zvukové alarmy se záznamem
- ovládání pomocí otočného kurzoru a tlačítek přímých vstupů
- zpětné zobrazení grafických a tabulkových trendů měřených parametrů
- SpO2 senzory Nellcor
- záložní akumulátor pro provoz až 5h
- Rozměry 300x180x129mm
- váha 2kg



VOLITELNÁ KONFIGURACE:

- **SpO2 (Nellcor)**
- **NIBP**
- **SpO2+NIBP**
- **SpO2+EKG**
- **EKG+NIBP**
- **SpO2+NIBP+EKG/Resp**
- **SpO2+NIBP+EKG/Resp+Teplota**
- **SpO2+NIBP+EKG/Resp+Teplota+CO2(ETCO2, InsOC2 a RR)**



Contec CMS8000V




CONTEC™

Monitor vitálních funkcí

Kompaktní, spolehlivý a cenově dostupný monitor vitálních funkcí Contec CMS8000V. Monitor je určen hlavně pro monitorování psů, koček a koní. Možnost připojení přes 3G, wifi nebo LAN k centrálnímu monitorovacímu systému.

- přehledný 12,1" barevný LCD displej
- dotykový displej (CMS7000 Plus)
- menu v českém jazyce
- jednoduché a intuitivní ovládání
- zobrazení až 8 křivek
- zobrazení velkých čísel na displeji
- světelné a zvukové alarmy
- alarmy: technické, 71 fyziologických a 60 arytmií
- výpočet dávkování medikamentů
- 3G, wifi nebo LAN propojení s centrálním monitorovacím systémem
- záznam 480 hodin trendů a 2400 měření NIBP
- ukládání dat a aktualizace softwaru přes USB rozhraní
- akumulátor pro 2h provozu při převozu pacienta
- možnost upevnění na zeď nebo pojízdný stojan
- rozměry: 310x140x263(mm)
- hmotnost: 3,8kg

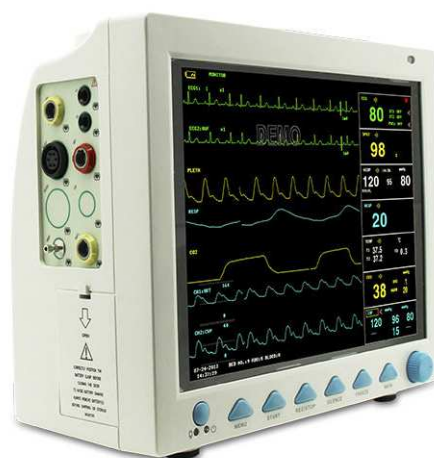

Základní parametry:

3/5 svodé EKG, respirace, NIBP, digitální SpO₂, 2x teplota, baterie

CE 0123

Volitelné parametry:

12svodové EKG, 2-IBP, EtCO₂ (sidestream, mainstream), dotykový displej, vestavěná tiskárna, VGA výstup, extra baterie, pojízdný stojan a držák na stěnu

7

ALWIL Medical s.r.o.

V Podhájí 776/30 • 400 01 • Ústí nad Labem • Czech Republic
tel. +420 475 210 451 • fax: +420 475 209 183 • info@alwilmedical.com



Hersill V7

Kvalitní, výkonná a spolehlivá přenosná odsávačka, kterou lze použít díky své všestrannosti v každé ordinaci a klinice.

Odsávačky s vysokým podtlakem: maximální průtok 14, 20 nebo 30L/min(dle typu odsávačky)

Odsávačky s nízkým podtlakem: nepřetržitý střídavý průtok 5l/min(typ odsávačky G7), speciálně vyvinutá odsávačka pro rány s drenáží.

Odsávačky V7 plus b, V7 plus b emergency and V7 mx jsou speciálně navrženy pro transporty



KVALITA / VÝKON / PŘESNOST / SPOLEHLIVOST

- Ergonomický kryt z ABS plastu. Úchytný systém na zadní straně krytu obstál testován na zátěž 10G..
- Pístová odsávačka (V7g: membránová odsávačka). Všechny modely mají bezolejový a bezúdržbový agregát
- Otočný knoflík podtlaku (V7g:otočný knoflík programu a podtlaku)
- Rozsah podtlaku: 0-100kPa / 0-760 mmHg (V7g zobrazení podtlaku: 0-20kPa / 0-150mmHg)
- Voděodolné tlačítko ON/OFF s ochrannou krytkou
- Baterie: LED ukazatel stavu(u všech modelů)
- 1L polykarbonátová nádoba s pojistným ventilem proti přeplnění nebo jednorázové sáčky
- Bakteriální filtr a sací hadice(PVC 8x13mm / 2m) součástí přístroje
- Yankauerova kanyla



Hersill V7



HERSILL
Medical Devices



	V7 ac	V7 dc	V7 plus ac	V7 plus dc	V7 plus b	V7 plus b emergency	V7 mx	V7 g
Nádoba PC1	5320201	5320211	5320251	5320251	5320261	5320281	5320236	5320271
Nádoba PC2	53220202	5320212	53220242	5320252	5320262	5320282	5320237	53220273
Příkon	220V(ac) 50Hz	12V(dc)	220V(ac) 50Hz	12V(dc)	12V(dc) Baterie	12V(dc) Baterie	240V(ac) 12V(dc) Baterie	240V(ac) 12V(dc) Baterie
Maximální sání	20 l/min	14 l/min	30 l/min	30 l/min	30 l/min	30 l/min	30 l/min	5 l/min
Maximální podtlak	80 kPa 600 mmHg	85 kPa 562 mmHg	84 kPa 630 mmHg	84 kPa 630 mmHg	84 kPa 630 mmHg	84 kPa 630 mmHg	84 kPa 630 mmHg	20 kPa 150 mmHg
Výkon	250W	18W	120W	85W	85W	85W	160W(ac) 84W(dc)	35W(ac) 30W(dc)
Interní baterie					12V-4,5Ah Ac-Pb 65 min	12V-4,5Ah Ac-Pb 65 min	12V-4,5Ah Ac-Pb 65 min	12V-1,3Ah Ac-Pb 120 min
AC bateriové napájení							●	●
AC/DC bateriové napájení					volitelný	volitelný		
10G držák na stěnu a 12V napájení						●		
Kabel 12/24V		●		●	●	●	●	●
Bakteriální filtr	●	●	●	●	●	●	●	●
Hlučnost	49 ± 1,5dB (AS) / 1 m							
Váha	3 Kg	2,2 Kg	3,5 Kg	2,5 Kg	4,2 Kg	4,2 Kg	4,5 Kg	2,5 Kg
Rozměry	výška 250 mm šířka 395 mm (nádoba PC1) 428 mm (nádoba PC2) hloubka 160 mm							
Potřebný prostor pro uchycení v záchrance	290 mm 395 mm (nádoba PC1) 428 mm (nádoba PC2) 168 mm							
Rozměry balení	460 x 210 x 290 mm (Š x H x V)							

9

ALWIL Medical s.r.o.

V Podhájí 776/30 • 400 01 • Ústí nad Labem • Czech Republic
tel. +420 475 210 451 • fax: +420 475 209 183 • info@alwilmedical.com



 4320290 základní držák na stěnu	 4320301 10G držák na stěnu 4320300 10G držák na stěnu včetně 12V dobíjení
 4320021 mobilní držák 3383007 nádoba na čištění sond (polykarbonát)	 4383001 PC1 (polykarbonátová láhev 1L) 4383000 PSU1 (polysulfonová láhev 1L) Jednorázové sáčky na sekret jsou v nabídce také.  4383002 PC2 (polykarbonátová láhev 1,75L) 4383012 PSU2 (polysulfonová láhev 1L) Jednorázové sáčky na sekret jsou v nabídce také.
 4320032 12V adaptér	 4320033 napájecí zdroj baterie 220V-12V
 3320223 transportní brašna	 0320014 ochranné pouzdro kompatibilní s 10G držákem na stěnu
   4340001 kovový rovný katétr 4340002 kovový zahnutý katétr 4340000 kovový držák katétru	 3320534 hydrofobní bakteriální filtr
 0940023 PVC hadice 8x13mm (1m, 30m v roli)	
 0310017 jednorázová Yenkauser kanyla	

Hersill EuroVac H-90



Chirurgická odsávačka EuroVac H-90 je nová generace odsávaček od společnosti Hersill. Tato odsávačka vyniká svým výkonem, kterým se zařadila mezi nejvýkonnější odsávačky na trhu. EuroVac H-90 je určena pro odsávání při chirurgických zákrocích, endoskopiích a uvolňování dýchacích cest.



KVALITA / VÝKON / PŘESNOST / SPOLEHLIVOST

- odolná odsávačka díky polypropylenovému šasi
- 4 integrovaná 80mm kolečka pro pohodlný přesun, dvě kolečka jsou opatřena brzdami a jedno je antistatické
- dvoupístová bezolejová, bezúdržbová odsávačka s výkonem až 90 L/min.
- 2x polysulfonové 4 L autoklávovatelné nádoby na sekret
- Otočný knoflík pro výběr nádoby(levá, práva) s třemi filtry pro každou nádobu
- On / Off vypínač a otočný knoflík pro přesnou regulaci vakua
- manometr pro přesné nastavení podtlaku: (0-100 kPa / 0-760 mmHg / 0-14,7 Psi)
- Ovládání odsávačky nohou pomocí pedálů(zapnutí / vypnutí, a regulace tlaku)
- 3m odsávací PVC hadice (Ø8 mm vnitřní - Ø15 mm vnější)
- maximální sání: 91 L/min (60 Hz)
- maximální podtlak: 93 kPa – 933 mbar – 700 mmHg
- hlučnost: 50 ±1,5 dB (AS) 1m
- výkon: 300 W
- napětí: 200 – 240 V (50-60 Hz)
- rozměry: 900 x 500 x 470 mm
- váha: 24,5 kg
- normy: EN ISO 10079-1:1999 - 93/42/CEE. Class IIb - EN 60601-1: Class I, Type BF, IPX1

SN-50C6

Jednokanálový injekční dávkovač

Jednokanálový injekční dávkovač SN-50C6 se vyznačuje jednoduchým ovládáním a přesným dávkováním díky svému preciznímu řídicímu systému. Hlavní výhodou je jednoduchá **kalibrace na jakýkoliv typ stříkačky**, čímž pomáhá šetřit náklady spojené s pořízováním předepsaných, většinou drahých stříkaček.



- základní model
- snadná obsluha, vysoká kvalita
- automatická kalibrace na jakýkoliv typ stříkačky
- automatické rozpoznání velikosti stříkačky
- tříúrovňový alarm okluze
- nastavování limitů dávkovaného množství
- informování o nadávkovaném množství
- KVO
- rychlé nastavení hodnoty dávkování
- uzamknutí tlačítek při dávkování
- optické a akustické alarmy
- indikátor síťového a bateriového napájení
- výdrž baterie až 6 hodin
- rozhraní RS232
- paměť na 1000 záznamů



SN-50F6



Dvoukanálový injekční dávkovač

Dvoukanálový injekční dávkovač SN-50F6 se vyznačuje jednoduchým ovládáním a přesným dávkováním díky svému preciznímu řídicímu systému. Hlavní výhodou je jednoduchá **kalibrace na jakýkoliv typ stříkačky**, čímž pomáhá šetřit náklady spojené s pořízováním předepsaných, většinou drahých stříkaček. Samozřejmostí je odlišné dávkování pro každý kanál a možnost využívání pouze jednoho kanálu.



- dva kanály s odlišným dávkováním
- možnost používání pouze jednoho kanálu
- snadná obsluha, vysoká kvalita
- automatická kalibrace na jakýkoliv typ stříkačky
- automatické rozpoznání velikosti stříkačky
- tříúrovňový alarm okluze
- nastavování limitů dávkovaného množství
- informování o nadávkovaném množství
- KVO
- rychlé nastavení hodnoty dávkování
- uzamknutí tlačítek při dávkování
- optické a akustické alarmy
- indikátor síťového a bateriového napájení
- výdrž baterie až 6 hodin
- rozhraní RS232
- paměť na 1000 záznamů



SN-1500H

Infuzní pumpa

Infuzní pumpa SN-1500H se vyznačuje jednoduchým ovládáním a přesným dávkováním, o které se starají dva procesory. Hlavní výhodou je možnost **kalibrace na jakýkoliv infuzní set**, čímž šetří náklady. Mezi další přednosti patří například chytrá kompenzace pulzování infuze, možnost ohřevu infuze, vysoce kvalitní pohonná jednotka s tišším chodem a méně vibracemi či osvětlení komory, které pomáhá zavádění infuzního setu při zhoršených světelných podmínkách.



- snadná obsluha, vysoká kvalita
- dvouprocesorový systém zaručující maximální bezpečnost dávkování
- možný ohřev infuze
- optické a akustické alarmy
- tříúrovňový alarm okluze
- ultrazvukový detektor bublin
- kapkový detektor
- kontrola rychlosti dávkování
- snadná kalibrace na daný infuzní set
- nastavitelné KVO
- podsvícený LCD displej s možností nastavení dávkování dle tělesné hmotnosti
- vestavěné osvětlení infuzního setu pro noční provoz
- funkce „chytré“ kompenzování pulzace
- možnost napájení pomocí 12 V DC
- indikátor síťového a bateriového napájení
- až 6 hodin provozu na akumulátor, volitelně i více
- nastavitelný systémový čas
- rozhraní RS232
- možnost bezdrátové komunikace
- možnost funkce „přivolání sestry“
- paměť na 1000 záznamů
- možnost horizontální i vertikální instalace



SN-1800V



Infuzní pumpa

Infuzní pumpa SN-1800V se vyznačuje jednoduchým ovládáním a přesným dávkováním, o které se starají dva procesory. Hlavní výhodou je možnost **kalibrace na jakýkoliv infuzní set**, čímž šetří náklady. Mezi další přednosti patří například chytrá kompenzace pulzování infuze, možnost ohřevu infuze, vysoce kvalitní pohonná jednotka s tišším chodem a méně vibracemi či osvětlení komory, které pomáhá zavádění infuzního setu při zhoršených světelných podmínkách.




- snadná obsluha, vysoká kvalita
- dvouprocesorový systém zaručující maximální bezpečnost dávkování
- možný ohřev infuze
- optické a akustické alarmy
- tříúrovňový alarm okluze
- ultrazvukový detektor bublin
- kapkový detektor
- kontrola rychlosti dávkování
- snadná kalibrace na daný infuzní set
- nastavitelné KVO
- podsvícený LCD displej s možností nastavení dávkování dle tělesné hmotnosti
- vestavěné osvětlení infuzního setu pro noční provoz
- funkce „chytré“ kompenzování pulzace
- možnost napájení pomocí 12 V DC
- indikátor síťového a bateriového napájení
- až 6 hodin provozu na akumulátor, volitelně i více
- nastavitelný systémový čas
- rozhraní RS232
- možnost bezdrátové komunikace
- možnost funkce „přivolání sestry“
- paměť na 1000 záznamů
- možnost horizontální i vertikální instalace



SN-H10

Průtokový ohřivač infuzních roztoků

SN-H10 je univerzální ohřívací systém určený pro ohřev všech typů infuzí a krevních produktů na operačních sálech a následné pooperační péči. Všechny medicínské kapaliny jsou ohřívány v elektricky vyhřívané formě a ve standardních infuzních setech jsou v teplém stavu dodávány až ke kanyle.

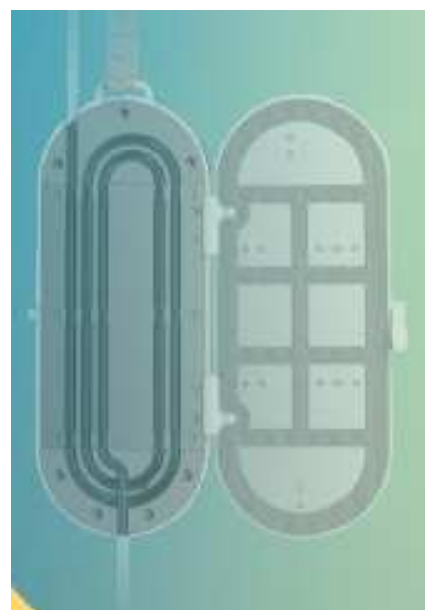

- snadná obsluha, vysoká kvalita
- přesné udržování nastavené teploty
- bezpečný díky alarmům
- dva nezávislé teplotní senzory
- rozmezí teplot: 35-42°C
- hmotnost: 0,25kg
- dodáváno v sestavě: držák pro uchycení na tyč, poutko pro zavěšení, napájecí adaptér, manuál v českém jazyce

Surtron 50D/80D



Elektrochirurgická jednotka

Základní a nejjednodušší vysokofrekvenční přístroj pro chirurgii měkkých tkání.



- snadná obsluha
- pracovní výkon: 50W(50D) a 80W(80D)
- pracovní režim: monopolár
- pracovní výstup: koagulace a řez
- rozměry: 190x239x85cm
- hmotnost: 2,5kg



CE www.surtron.com

Surtron 80 / 120 /160

Elektrochirurgická jednotka

Kvalitní a spolehlivý vysokofrekvenční přístroj pro chirurgii měkkých tkání s různými funkcemi a kompaktním vzhledem.



- různé funkce, kompaktní vzhled
- snadná obsluha
- pracovní výkon: 80W(80), 120W(120), 160W(160)
- pracovní režim: monopolár, bipolár
- pracovní výstup: 2 typy koagulace a řezu
- rozměry: 254x288x104cm
- hmotnost: 5kg



CE www.surtron.com

Vela a Apus Quartz



Sterilizátory

Automatický sterilizátor dodávaný včetně kuliček z křemene a sterilizační komory vyrobené z nerezové oceli. Je to malý, levný a velmi rychlý sterilizační přístroj. Jeho použití je vhodné do všech veterinárních ordinací a klinik. STERILIZÁTOR VELA a APUS QUARTZ je vyroben z nerezové oceli lakované epoxidovým práškovým lakem. Vnitřní válec je plně izolován keramikou a sklem, které zabraňuje přenášení tepla na vnější části sterilizátoru.



- rozměry ster. válce: průměr 38mm a hloubka 75mm
- kapacita kuliček z křemene: 200g
- výkon: 80W
- napájení: 230/240V
- pojistka: 6,3x32-0,5A
- pracovní teplota: 240°C
- vnější rozměry: 104x150x130mm
- hmotnost: 1,6kg

- rozměry ster.válce: průměr 65mm a hloubka 75mm
- kapacita kuliček z křemene: 500g
- výkon: 160W
- napájení: 230/240V
- pojistka: 6,3x32-0,8A
- pracovní teplota: 240°C
- vnější rozměry: 129x150x160mm
- hmotnost: 1,7kg

Hot Dry 1,5L a 7L

Horkovzdušné sterilizátory

Horkovzdušný sterilizátor se snadným použitím, bezpečný a výkonný. Je vhodný pro sterilizaci kovových nástrojů např.: chirurgické nástroje z nerezavějící oceli, nástroje z uhlíkové oceli, nebo sklo,



- rozměry ster. komory: 245x55x115mm
- objem komory: 1,5l
- termostat: 50-200°C
- steril. cyklus: 0-120min
- steril. teplota: 150-180°C
- výkon: 250W
- napájení: 230/240V
- pojistka: 6,3x32-2A
- vnější rozměry: 310x190x190mm
- hmotnost: 4,9kg

- rozměry ster. komory: 415x90x185mm
- objem komory: 7l
- termostat: 50-200°C
- steril. cyklus: 0-120min
- steril. teplota: 150-180°C
- výkon: 400W
- napájení: 230/240V
- pojistka: 6,3x32-2A
- vnější rozměry: 490x230x320mm
- hmotnost: 10,6kg

Hydra 100



Autokláva třídy N

Autokláva Hydra 100 je vybavena topným tělesem umístěným pod sterilizační komorou, které umožňuje ohřev destilované vody na 125°C. Tato teplota a tlak vytvořený uvnitř sterilizační komory poskytuje kompletní sterilizaci nástrojů. Sterilizační zařízení je vybaveno několika senzory, aby vždy došlo k dosažení nastavené teploty, kterou nelze změnit, aby nedocházelo k ovlivňování sterilizace.



- rozměry ster. válce: průměr 220mm a hloubka 235mm
- objem: 9l
- sterilizační medium: destilovaná voda
- provozní teplota: 125°C
- sterilizační cyklus: 15min
- provozní tlak: 1,3-1,6bar
- výkon: 1500W
- napájení: 230/240V
- vnější rozměry: 385x250x310mm
- hmotnost: 13,3kg



V případě potřeby lze nabídnout sterilizátory i s vyšším objemem a výkonem.

Nabídka servisních služeb zdravotnické techniky

Dovolujeme si Vás také oslovit s nabídkou provádění servisních služeb pro zdravotnickou techniku. Naším cílem je poskytnout komplexní službu a kvalitní a rychlé servisní zásahy u Vašich přístrojů. Naše společnost působí na českém trhu již 25let a jsme schopni pokrýt celou republiku. Servisní zásahy jsme schopni provádět přímo u Vás v ordinacích, nebo lze přístroj stáhnout našimi obchodními zástupci, kteří jsou dennodenně v terénu. Dále je také možné využít služby přepravní společnosti DPD, která po objednání svozu u Vás přístroj vyzvedne a doveze k nám do servisního centra. Bližší informace Vám rádi poskytneme na tel. čísle 475 210 451. V případě časově náročnějšího servisního zásahu (nutné objednání náhradního dílu, který je špatně dostupný) jsme schopni zapůjčit náhradní přístroj, aby nebyl ohrožen chod Vaší praxe.

Seznam druhů zdravotnické techniky, u kterých poskytujeme servisní a kontrolní činnosti:

Monitory vitálních funkcí: GE, Datex, SpaceLabs, Mindray, Philips, Edan, BCI, atd.

Pulzní oxymetry: BCI, Nellcor, Nonin, Edan, Mindray, Novamatrix, Masimo atd.

Kapnometry a kapnografy: BCI, Novamatrix, Nellcor, Emma, Criticare atd.

NIBP měřiče: Omron, Tensoval atd.

Elektrokardiografy: Schiller, Philips, GE, Fukuda Denshi, Edan atd.

Defibrilátory: Lifepak, Philips, Nihon Kohden, Zoll atd.

Elektrokoagulační přístroje-VF: Ebre, Martin atd.

Chirurgie odsávačky: Medela, Cheiron, Weinmann atd.


Infuzní pumpy a injekční dávkovače: ID, B.Braun, Fresenius, Argus, Terumo atd.

Pro uvedené druhy zdravotnické techniky máme metrologicky vedené testery a simulátory, které jsou pravidelně kalibrovány v autorizovaných střediscích.



Příslušenství – SpO2 senzory

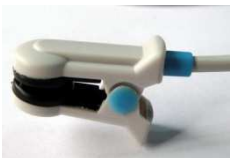

SpO2 senzory pro opakované použití			
	kolíčkový senzor		kolíčkový senzor malý
	ušní senzor		silikonový senzor
	Rektální reflexní senzor		„Y“ senzor s klipem



- A. Rektální/reflexní SpO2 senzor, 3m
- B. Držák pro rektální/reflexní senzor
- C. „Y“/univerzální SpO2 senzor, 3,
- D. Držák pro „Y“/univerzální senzor, malý
- E. Držák pro „Y“/univerzální senzor, střední
- F. Držák pro „Y“/univerzální senzor, velký
- G. Univerzální VET EKG adaptéry(krokodýl)

(Ize připojit na patentek, kleštinku i 4mm banánek)

Příslušenství – NIBP manžety a hadice

- NIBP manžety jednovývodové
- NIBP manžety dvouvývodové
- NIBP prodlužovací hadice jednovývodové
- NIBP prodlužovací hadice dvouvývodové



- NIBP manžeta stehenní(46-66cm)
- NIBP manžeta pro dospělého - větší(33-47cm)
- NIBP manžeta pro dospělého(25-35cm)
- NIBP manžeta pro dítě(16-26cm)
- NIBP manžeta pro kojence(10-19cm)
- NIBP manžeta pro novorozence(6-11cm)



- NIBP koncovky



Příslušenství – EKG kabely a koncovky



- EKG kabely v celku
- EKG kabely dělené
- EKG koncovky



- 3-svodové koncovky a kabely
- 4-svodové koncovky a kabely
- 5-svodové koncovky a kabely



- EKG adaptéry



Příslušenství – teplotní senzory

- teplotní senzory povrchové
- teplotní senzory rektální/jícnové
- teplotní senzory jednorázové
- teplotní prodlužovací kabely
- teplotní redukce



Příslušenství – elektrochirurgie

- rukojeti pro opakované použití
- jednorázové rukojeti
- elektrody pro opakované použití
- jednorázové elektrody



- bipolární pinzety pro opakované použití





ALWIL Medical s.r.o.
V Podhájí 776/30
Ústí nad Labem 400 01
www.alwilmedical.com
info@alwilmedical.com
tel.: 475 210 451 fax: 475 209 183

